

MILKOTRONIC LTD

LACTOSCAN MCCW

MILK ANALYZER работает напрямую под
контролем планшета Windows


Первое включение

Сборка устройства

Откройте коробку. Осторожно достаньте содержимое из коробки. Установите машину на ровной поверхности

Включение системы

1. Включить usb hub на задней панели устройства (отдельный источник питания)

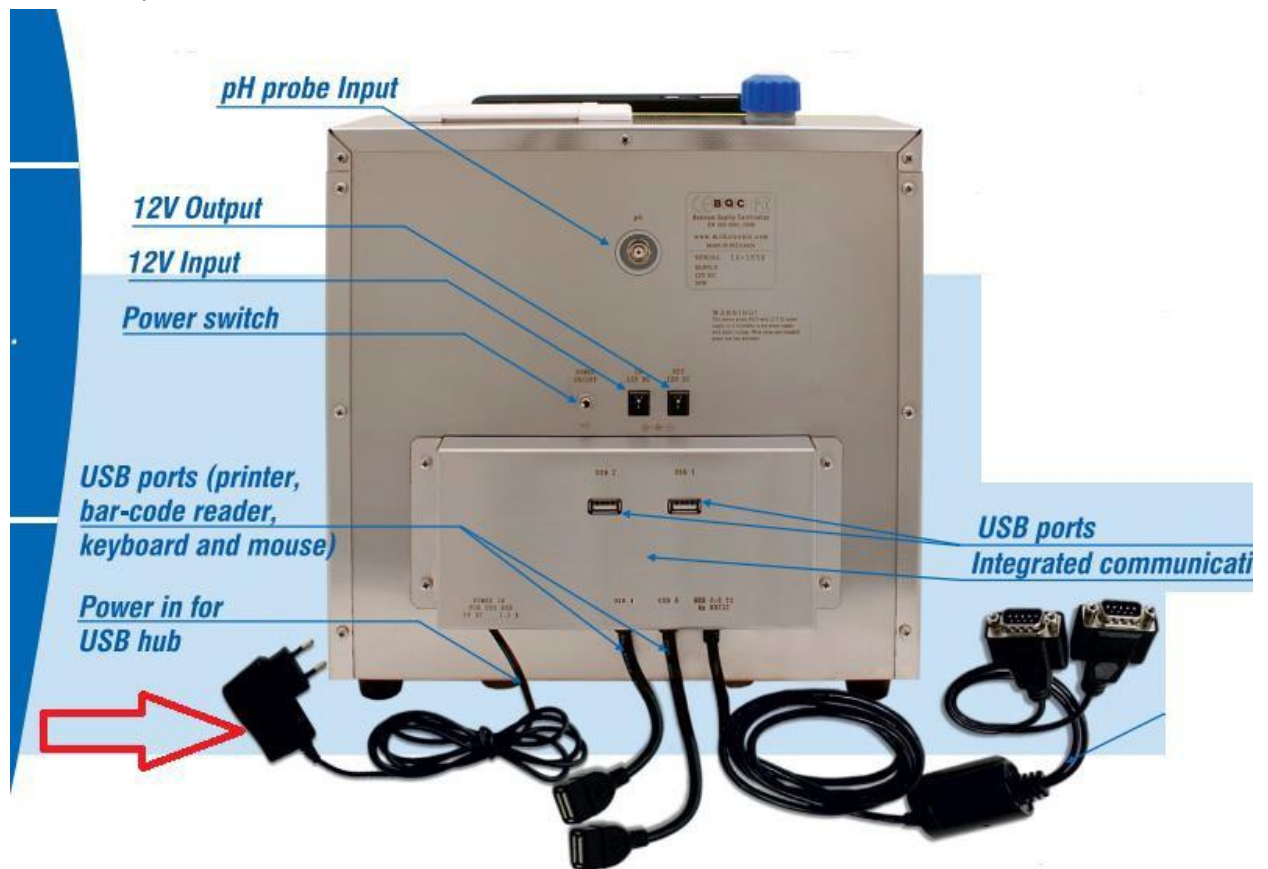

2. Подключите блок питания анализатора в один из входов на задней панели




3. Подключите любые USB-устройства, которые будут необходимы (клавиатура, мышь и т.д.) в USB вход



4. Если необходимо подсоедините pH зонд к задней панели



И поместите зонд под крышку

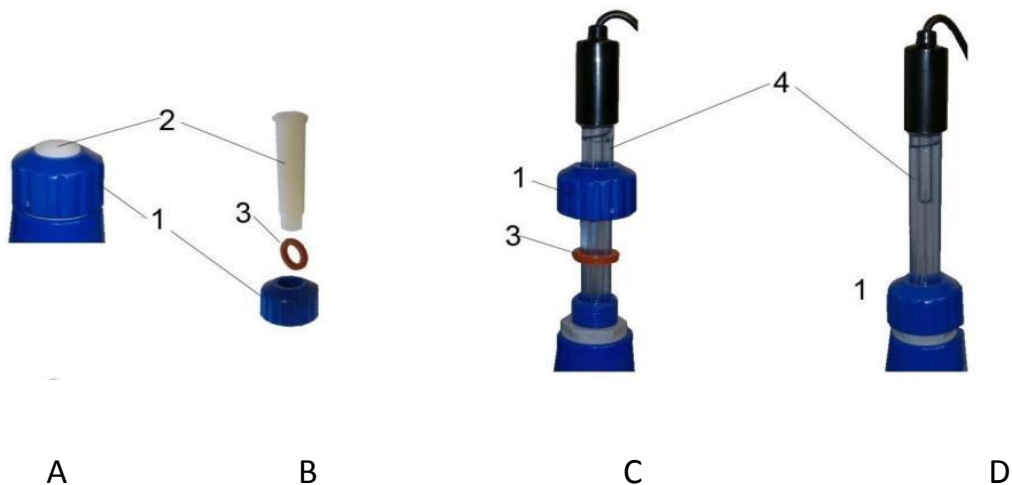

- 1) Ослабьте гайку против часовой стрелки (1)
- 2) Потяните пробку вверх (2)
- 3) Осторожно поместите pH зонд, обращая внимание, чтобы не снять уплотнительное кольцо (3)
- 4) Поместите зонд с гайкой в отверстие (C & D) и затяните его.



Если вы не используете устройство более 2 дней, то необходимо снять зонд и поместить пробку на место. РН зонд должен храниться отдельно в соответствии с инструкциями пункта 2.3 Приложение 3 Руководства пользователя


5. Включите Lactoscan при помощи переключателя на задней панели



6. Включите планшет (левая кнопка на длинной верхней стороне планшета)




7. Дождитесь открытия программы
8. Если все подключено правильно, то на экране появится сообщение "Готов начать"

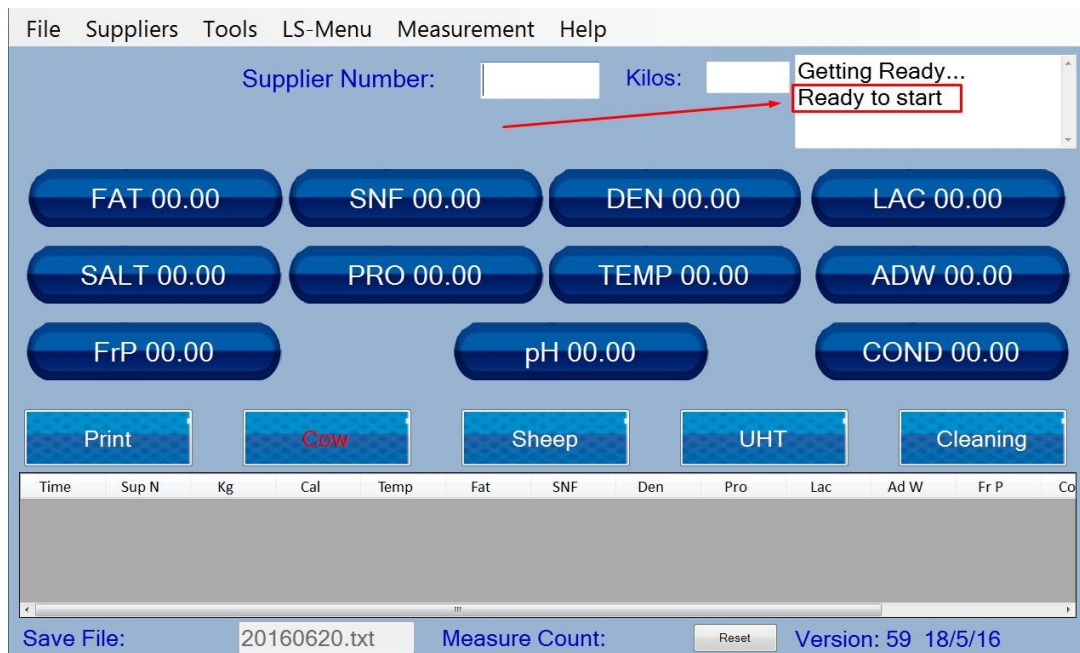


9. Заполните стаканчик образцом молока и поместите его в анализатор, длинный шланг находится в молоке, короткий шланг не касается молока, стаканчик помещается на белый держатель



10. Начать измерение, нажав на экране название калибровки т.е. тип молока, который необходимо измерить (если вы измеряете коровье молоко, нажмите кнопку Корова)

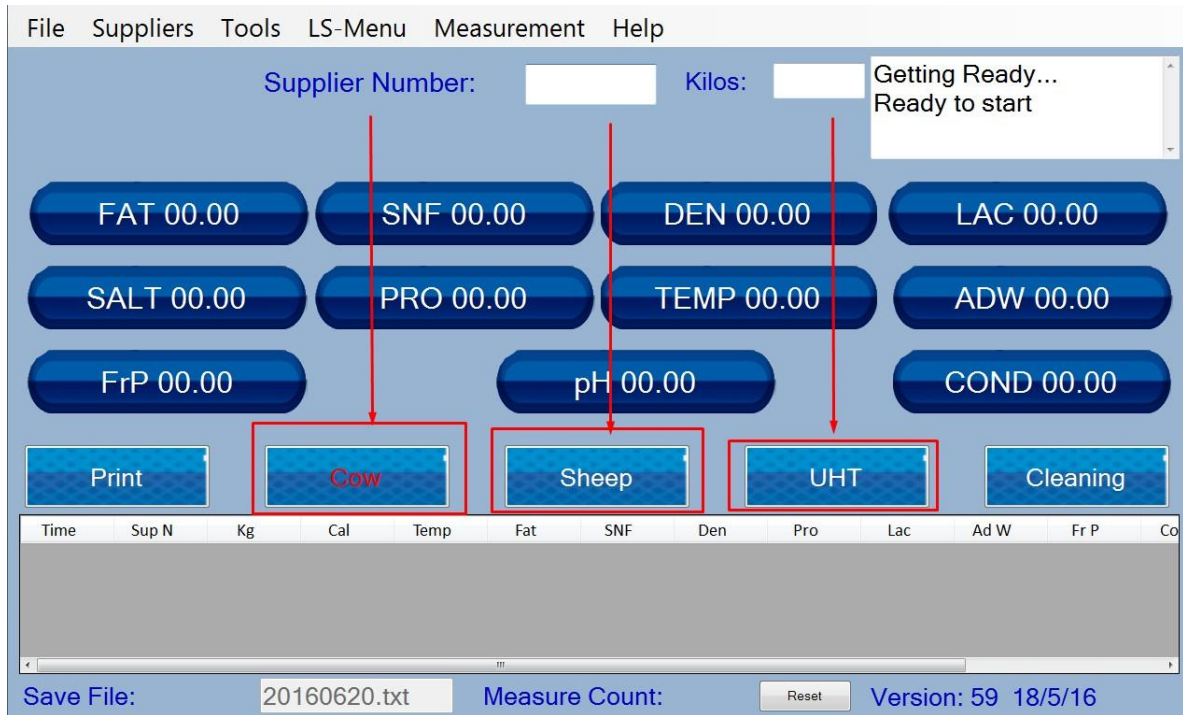

11. После запуска измерения на экране появляется

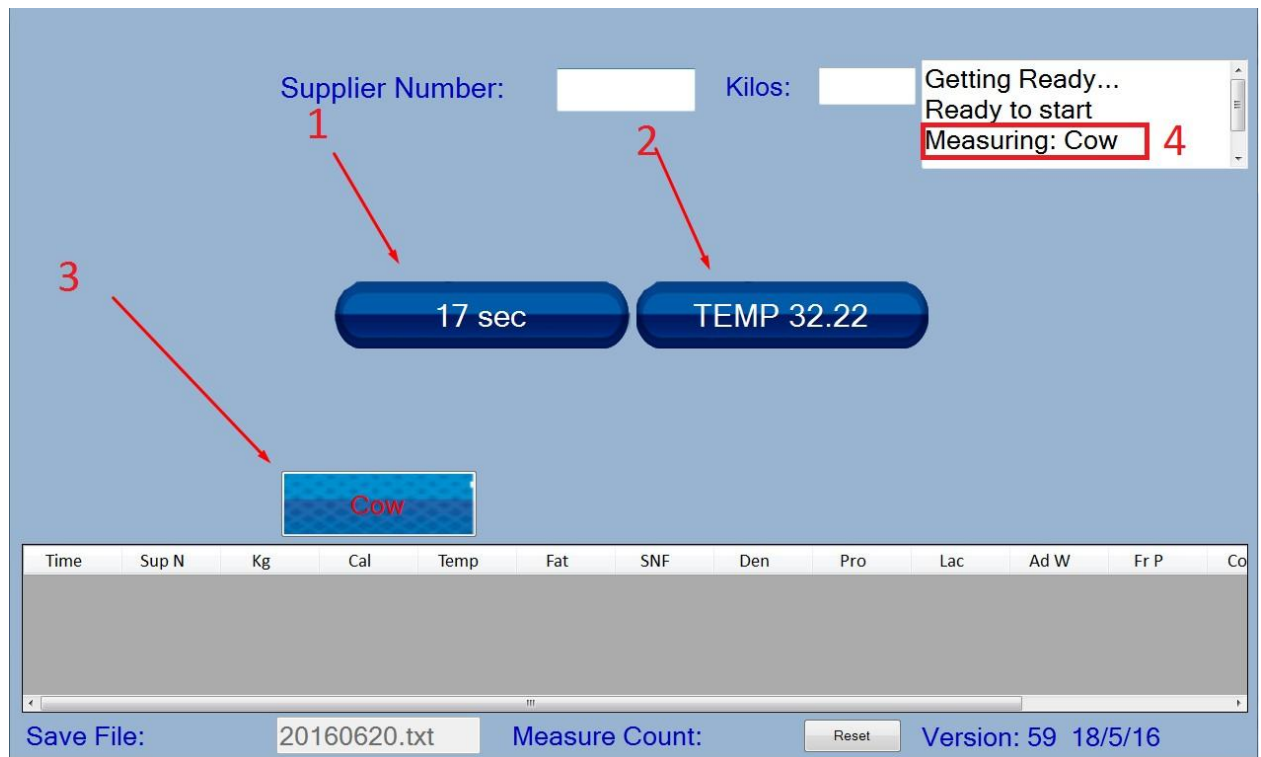

Где:


Позиция 1: Показывает сколько секунд осталось до завершения измерения

Позиция 2: Температура образца

Позиция 3: Тип калибровки, который используется

Позиция 4: Сообщение о том, какая калибровка используется для измерения

12. Когда измерение закончено

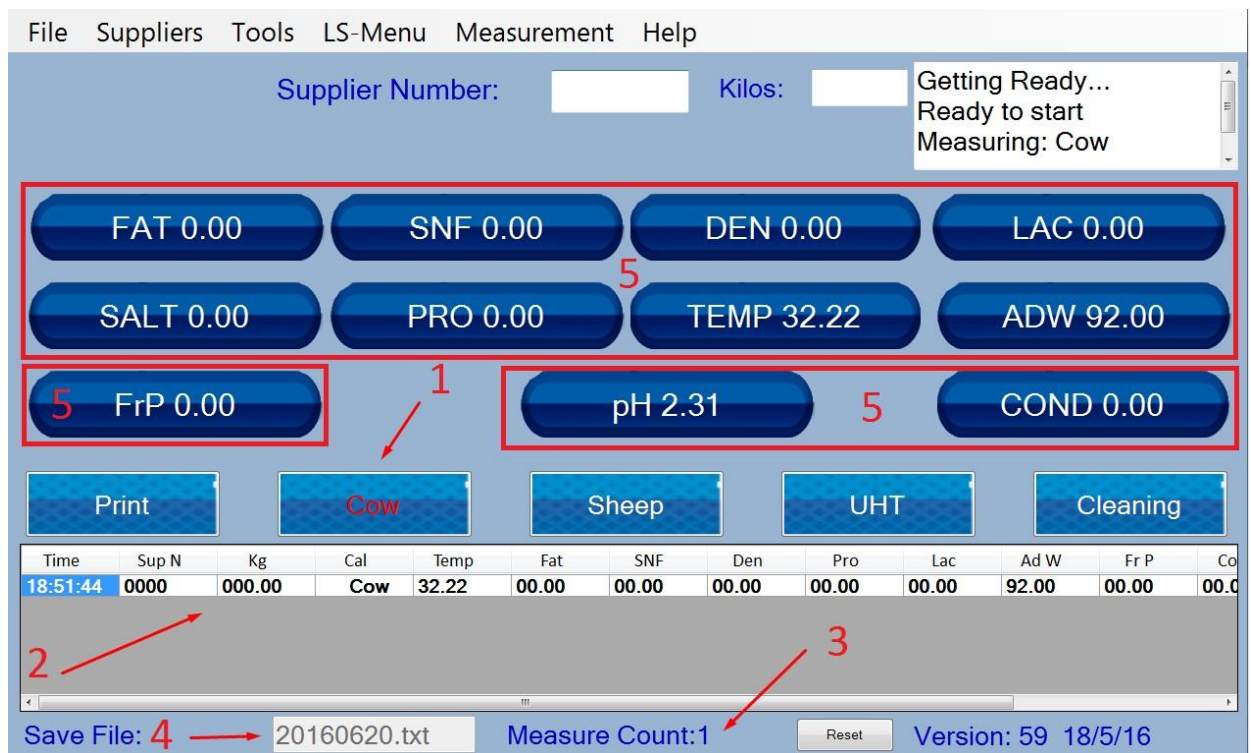

Где:

Позиция 1: Выделена последняя использованная калибровка

Позиция 2: Результат коллектора для всех измерений, совершенных с начала программы


Позиция 3: Количество измерений с момента запуска программы

Позиция 4: Архив файлов для результатов

Позиция 5: Поля для параметров результатов последнего измерения

13. Продолжите работу путем размещения нового образца в стаканчике, нажмите кнопку калибровки

14. По окончании работы поместите чистую воду в стаканчик и начните очистку, нажав на кнопку чистки

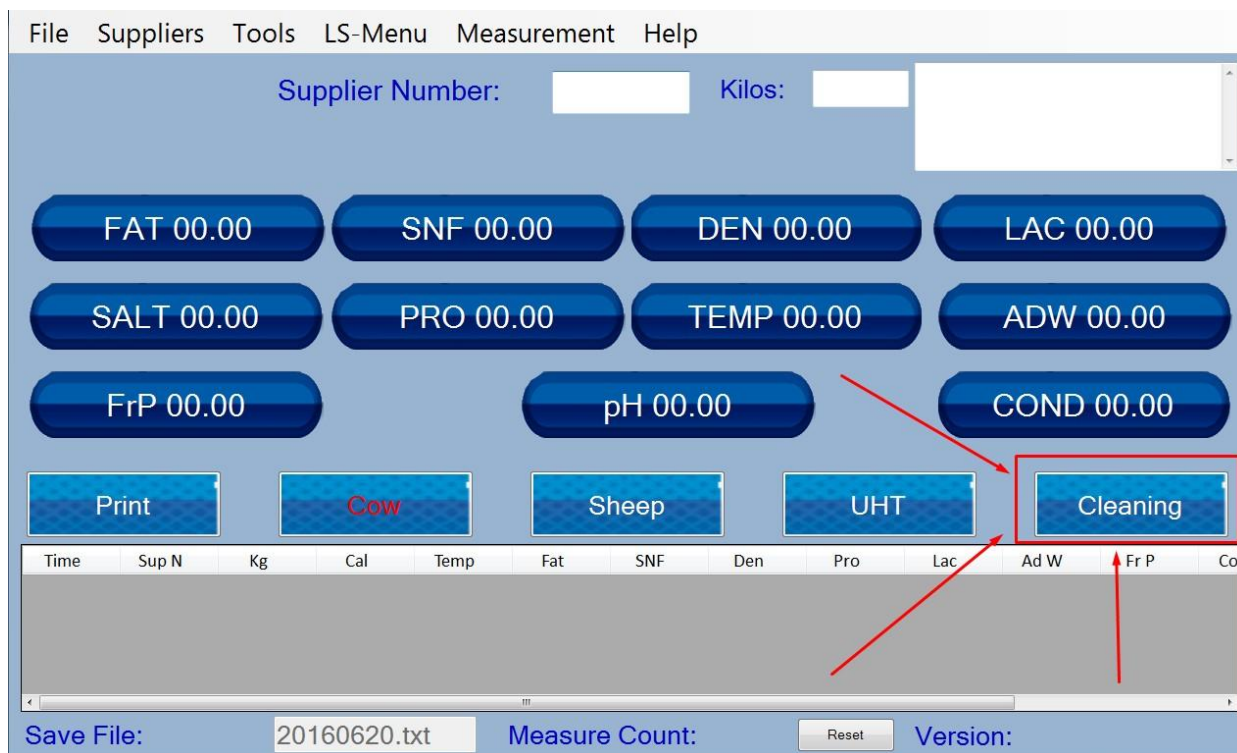


15. Пожалуйста, обратитесь к инструкции чтобы правильно произвести очистку устройства

ВАЖНО


ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СБОЕВ В РАБОТЕ УСТРОЙСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОХАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА. В случае неисправность по причине плохой очистки анализатора, гарантия больше не действует и любой ремонт должен быть оплачен.

Выключение системы

1. Чтобы выключить планшет выберите File -> Shutdown

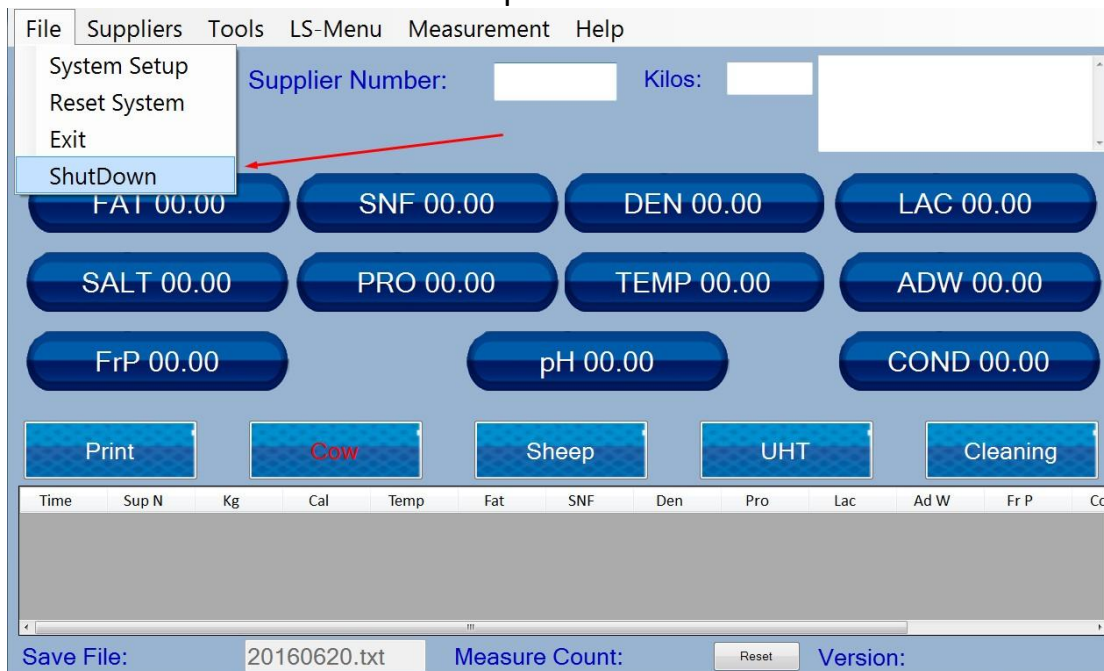

2. Для выхода из программы выберите File -> Exit чтобы закрыть программное обеспечение, чтобы использовать планшет

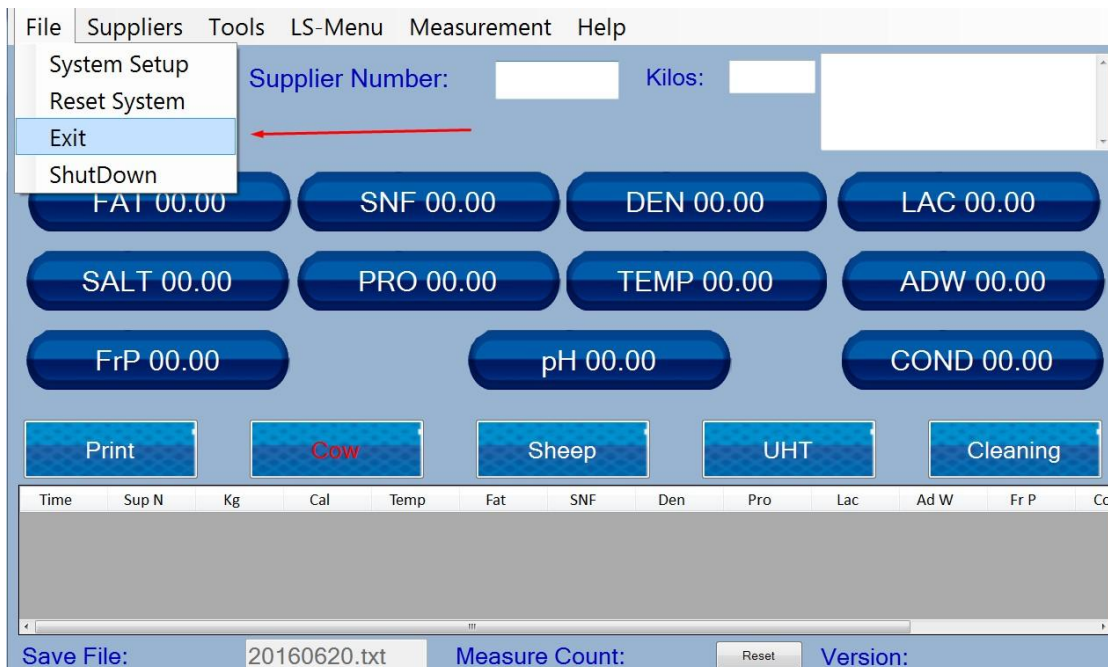

3. Выключите анализатор при помощи выключателя на задней панели

* Примечание: Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу какой-либо из процедур, пожалуйста, свяжитесь с Milkotronic LTD