



Bomba de vacío sin aceite Rocker 300

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)


Detalle

Compacta y de fácil cuidado

Las bombas de vacío sin aceite Rocker son de tamaño compacto, livianas y libres de neblina de aceite.

Protección contra desbordamiento Prote™

Equipada con protección contra desbordamiento Prote™ para evitar que el líquido sea aspirado hacia la bomba.

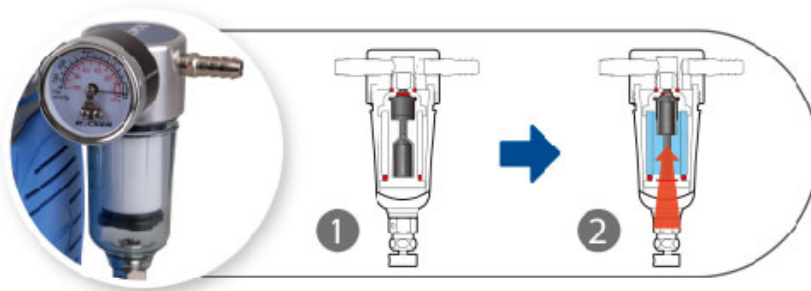

Protección en la entrada de aire

El cartucho filtrante en la entrada de aire filtra partículas y humedad, lo que evita daños en la bomba.

Regulación de vacío

Equipada con vacuómetro y regulador para el monitoreo y ajuste del vacío.

Protección contra sobrecalentamiento

Todas las bombas de vacío sin aceite Rocker están equipadas con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que las apaga cuando se sobrecalientan y las reactiva una vez enfriadas, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación CSA
- Protección IP 30
- Certificación RoHS

Número de parte del producto	Descripción
167300-11	Rocker 300, bomba de vacío AC110V, 60Hz
167300-22	Rocker 300, bomba de vacío AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	Rocker 300: 110V/60Hz	Rocker 300: 220V/50Hz
Potencia máx.	65W	60W
Corriente máx.	0.7A	0.3A
Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
Caudal máx.	23 L/min	20 L/min
Nivel de ruido	50 dB	50 dB
Conector de manguera	ID8	ID8
Peso neto	4.1 Kg	4.1 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	27 x 14 x 20 cm	27 x 14 x 20 cm
Regulador de vacío	Sí	Sí
Cartucho filtrante	Sí	Sí
Protección contra desbordamiento	Sí	Sí
Protección contra sobrecalentamiento	Sí	Sí

Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Ensayo de sólidos suspendidos
- Detección microbiana
- Muestreo de aire

Publicación	Autor	Método aplicado
-------------	-------	-----------------

Publicación	Autor	Método aplicado
Cryopreservation of the gorgonian endosymbiont Symbiodinium	Gabriella Chong et al.	Filtración de agua de mar
First instance of settlement by cryopreserved coral larvae in symbiotic association with dinoflagellates	Luca Cirino et al.	Filtración de agua de mar
First Characterisation of Volatile Organic Compounds Emitted by Banana Plants	Chadi Berhal et al.	Recolección de COV
Detection and characterization of small-sized microplastics ($\geq 5 \mu\text{m}$) in milk products	Paulo A. Da Costa Filho et al.	Filtración de muestras de leche

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)