


MOLINO DE TARRO



SKU: N / A | **Categorías:** [Ceramic Instruments](#), [Molinos - Mezcla](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

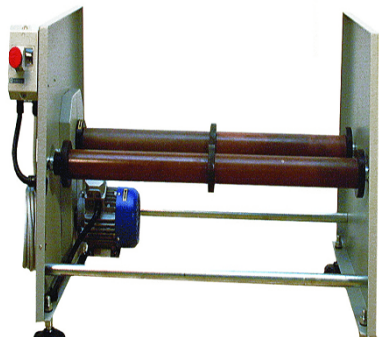

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molinos de tarros

Máquinas para usar con tarros de porcelana, las capacidades van desde un mínimo de 1,5 hasta un máximo de 15 litros. Adecuado para la realización de pruebas de rectificado o pruebas sencillas de mezclado en húmedo sobre esmaltes y colorantes cerámicos, pinturas y otros productos. También se pueden utilizar para la trituración en seco de sustancias sólidas como arcillas, varios minerales, etc. Se pueden utilizar para pequeñas series de producción, así como para pruebas de laboratorio.

Características comunes de todos los modelos:

- Rodillos recubiertos de caucho vulcanizado de distancia ajustable.
- Diámetro del rodillo: 60 mm.
- Velocidad de los rodillos: aproximadamente 280 rpm.
- Acabados precisos.
- Estructura de chapa de acero perfilada pintada con polvo epoxi.
- Accionamiento transmitido desde el motor a los rodillos mediante una correa trapezoidal elástica ajustable para los modelos de suelo (con resguardo de seguridad) y motorreductor.
- Pies regulables en altura.

Especificaciones Técnicas:

Inserta aquí las especificaciones técnicas del producto.

Archivos adjuntos

- [GR series](#)
- [Recipiente de Porcelana](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO